



TodoMicro

La tecnología en tus manos

MANUAL DE USUARIO GUN-MASSAGER-1



SERVICIO TÉCNICO
BUENOS AIRES, ARGENTINA
WHATSAPP: +54 9 1122524893
MAIL: SOPORTE@TODOMICRO.COM.AR

LA COMPRA INCLUYE:

- Pistola Masajeadora
- Maletín Protector
- Cargador De 16,8v
- 6 Accesorios
- Manual

6 ACCESORIOS Para 6 masajes distintos



ESPECIFICACIONES

- Color : Negro
- Capacidad de la Batería : 2500Mah
- Velocidad en nivel máximo: 3200 RPM
- Frecuencia Vibración : Primero marcha: 1-20 HZ
- 30 Velocidades de Masajes
- 6 Accesorios para 6 distintos masajes
- Autonomía: 4 Horas
- Tamaño : 26 x 17 x 6.3cm aprox
- Nivel De ruido: 65db
- Indicador de Carga

30 VELOCIDADES DE MASAJE



INSTRUCCIONES DE USO:

CARGA:

- Antes de usarlo por primera vez, dejarlo cargando durante 3 horas.
- Asegúrese que el switch esté en OFF luego el led hará un juego de luces que indicará que está recibiendo carga correctamente.
- No lo utilice cuando está cargando.
- No es recomendable agotar la batería para volver a cargarla.
- La batería se puede cargar en cualquier momento y en cualquier nivel de batería.
- La duración de funcionamiento del aparato es de aproximado 4 horas dependiendo de la velocidad y presión aplicada durante el uso.

INTERCAMBIO DE CABEZALES:

Al montar o intercambiar los cabezales la máquina debe estar apagada. Aplicar el cabezal en la dirección ilustrada en la Fig.1. luego empuje hasta que el gancho esté asegurado el resultado se ilustra en la Fig.2.

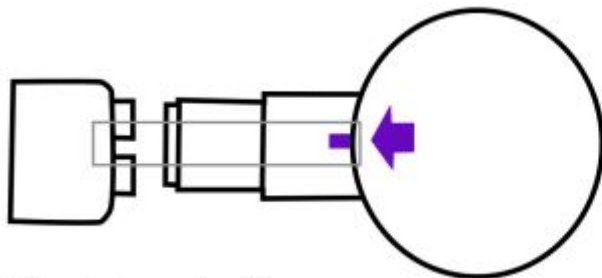


Fig. 1. Instalación

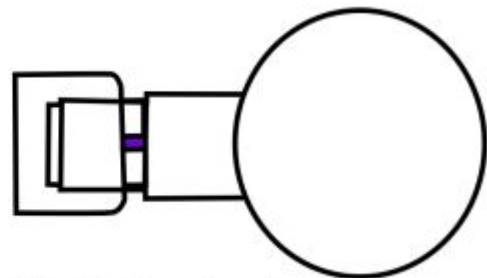


Fig. 2. Resultado

USO:

- Cambie el Switch que se encuentra abajo de la batería para que quede en ON y presione en el display encendido/apagado para que la pistola masajeadora empiece a funcionar.
- Presione y mueva suavemente sobre la piel. La duración en cada parte debe ser de unos 60 segundos
- Utilice este dispositivo sólo en los tejidos blandos del cuerpo para no causar dolor ni molestias. No lo utilice en la cabeza ni en ninguna parte dura o huesuda del cuerpo

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- No sumerja el producto en agua, manténgalo lejos de líquidos o fuentes de calor.
- Mantenga los puertos de ventilación libre de polvo y basura.
- No remueva tornillos ni intente desarmar el producto.
- No lo utilice de manera continua por más de una hora y deje de utilizarlo al menos por 30 minutos antes de comenzar nuevamente.
- Desenchufe el cargador de la batería del dispositivo antes de utilizarlo.
- Solo puede ser utilizado por adultos, recomendamos no utilizarlo si se encuentra lesionado. Consulte a su médico ante cualquier inquietud.
- No permita que se caiga o un uso inadecuado
- No altere ninguna propiedad del producto.

GARANTÍA:

Nuestros productos cuentan con garantía de **6 meses** a partir de la fecha de compra por cualquier defecto de fabrica.

No serán aceptados aquellos artículos que **incumplan** las:
“ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES”

Nuestro Servicio Técnico se encuentra ubicado en **Leiva 4690**, Chacarita de lunes a viernes de 9 a 18hrs para poder aplicar una garantía tiene que **acercar o enviar el artículo a su cargo** a esa dirección con previa autorización de departamento técnico comunicándose a alguno de los siguientes medios:

WHATSAPP: +54 9 1122524893

MAIL: SOPORTE@TODOMICRO.COM.AR